



Allegato al manuale d'uso per il

Leica CV5030

Montavetrini automatico

Allegato al manuale d'uso
Leica CV5030, V 3.3 RevJ, Tedesco – 07/2016
2015-001 Allegato a CV5030 V 1.0 RevD – 07/2016

Conservare sempre in prossimità dell'apparecchio.
Leggere accuratamente prima della messa in funzione.

Nuovo capitolo 5.4.1 Inserto vaschetta HistoCore SPECTRA ST



L'inserto vaschetta e la relativa clip per il portavetrini HistoCore SPECTRA ST serve per poter utilizzare il portavetrini HistoCore SPECTRA ST per 30 vetrini nel montavetrini automatico CV5030.



- Per evitare danni dei campioni non è mai consentito inserire vetrini in portavetrini su cui sia già stata applicata una clip.
- La clip può essere applicata esclusivamente dopo aver prelevato il vetrino da SPECTRA ST. Se si utilizza la clip durante il processo di colorazione, possono avvenire collisioni nell'apparecchio che possono portare all'interruzione dei processi di colorazione.
- La staffa del portavetrini (1, Fig. C) deve essere assolutamente rimossa dal portavetrini prima dell'inserimento nel CV5030.



Fig. A

Preparazione del CV5030 per inserto vaschetta HistoCore SPECTRA ST

- Aprire il cassetto di carico del CV5030 (vedere cap. 4.10 fig. 27), tirare in avanti il contenitore di carico.
- Togliere l'inserto vaschetta già presente, controllare che la vaschetta non presenti polvere di vetro e all'occorrenza pulirla.
- Inserire l'inserto vaschetta (1, Fig. A) HistoCore SPECTRA ST (vedere fig. A) nel contenitore di carico.



Fig. B

Preparazione portavetrini con clip

- Togliere il portavetrini da HistoCore SPECTRA ST.
- Aprire la staffa del portavetrini e montare quest'ultimo mantenendo una certa inclinazione (Fig. B).
- Collocare con cautela la clip sui vetrini e assicurarsi che di volta in volta uno sia presente nella relativa rientranza della clip (vedere anche Fig. C).
- Togliere quindi il portavetrini.
- Con cautela, premere verso il basso la clip con entrambe le mani fino ad innesto (Fig. C).
- Rimuovere la staffa del portavetrini (1, Fig. C).
- Aprire il vano di carico del CV5030 e inserire il portavetrini nell'inserto vaschetta.
- Montare i vetrini come descritto nel Cap. 5.5.

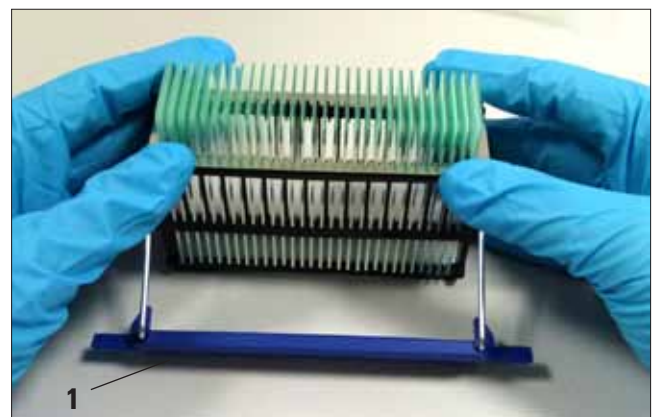


Fig. C

Nuove informazioni nel Capitolo 9.1 Accessori opzionali

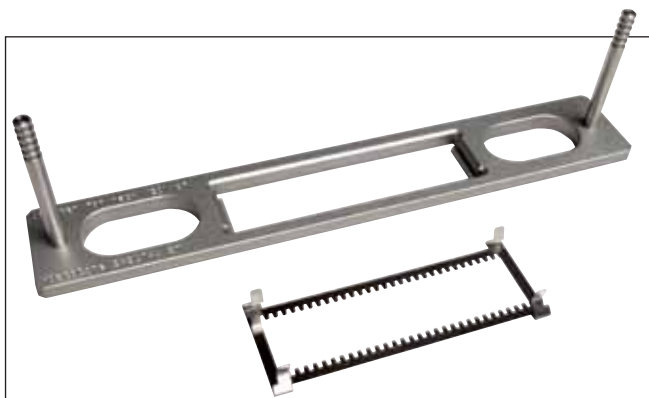


Fig. D

Kit inserto vaschetta portavetrini 30

HistoCore SPECTRA ST,

per portavetrini Leica,
da 30 vetrini

Composto da:

1 adattatore 14 0478 54396

1 clip 14 0478 55510

No. ordine. 14 0478 55522

Kit clip portavetrini 30 HistoCore SPECTRA ST,

Costituito da 2 clip

No. ordine. 14 0478 55510

**Inserto vaschetta portavetrini 30 HistoCore
SPECTRA ST,**

per portavetrini Leica,
da 30 vetrini

No. ordine. 14 0478 54396

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Straße 17-19
D- 69226 Nussloch
Tel.: +49 6224 - 143 0
Fax: +49 6224 - 143 268
web: www.LeicaBiosystems.com