



Arkusz dodatkowy do instrukcji obsługi

Leica CV5030

Automat do zamykania preparatów

Arkusz dodatkowy do instrukcji obsługi

Leica CV5030, V 3.3 RevJ, Polski – 07/2016

2015-001 Arkusz dodatkowy dla CV5030 V 1.0 RevD – 07/2016

Prosimy o przechowywanie niniejszego dokumentu wraz z urządzeniem.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed rozpoczęciem pracy.


Nowy rozdział 5.4.1 Wkładka łaźni dla HistoCore SPECTRA ST



Wkładka łaźni i klips muszą być stosowane ze statywem preparatów HistoCore SPECTRA ST na 30 preparatów z urządzeniem do nakładania szkiełek nakrywkowych CV5030.



- Aby nie dopuścić do uszkodzenia preparatów, szkiełka nie powinny być nigdy wkładane do statywu, do którego został już przymocowany klips.
- Klips powinien być przymocowany dopiero po wyjęciu statywu preparatów z urządzenia SPECTRA ST. Używanie klipsa w trakcie procesu barwienia może spowodować kolizje w urządzeniu, co może prowadzić do przerwania procesu barwienia.
- Rączkę statywu preparatów (1, Rys. C) należy wyjąć ze statywu preparatów przed założeniem go do CV5030.

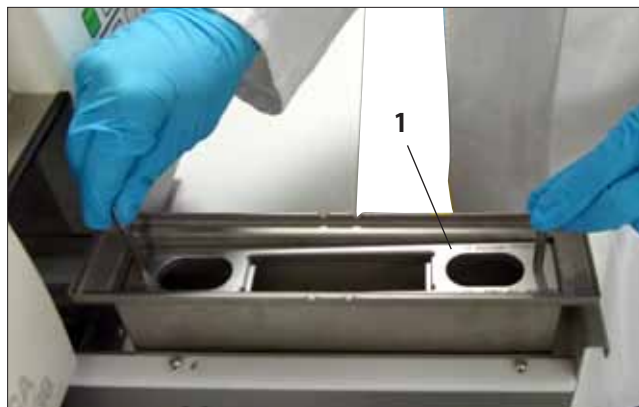

Rys. A

Przygotowanie CV5030 na wkładkę łaźni HistoCore SPECTRA ST


- Otworzyć szufladę załadowniczą CV5030 (patrz Rozdz. 4.10 Rys. 27) i wysunąć łaźnię załadowniczą do przodu.
- Wyjąć wkładkę łaźni, sprawdzić, czy w łaźni nie ma resztek szkła i, jeśli potrzeba, oczyścić łaźnię.
- Umieścić wkładkę łaźni HistoCore SPECTRA ST (patrz Rys. A) w łaźni załadowniczej.

Mocowanie klipsa na statywie preparatów

- Wyjąć statyw preparatów z HistoCore SPECTRA ST.
- Rozłożyć rączkę statywu preparatów i przytrzymać statyw preparatów pod kątem (Rys. B).
- Umieścić ostrożnie klips nad preparatami i upewnić się, że w każdym otworze klipsa znajduje się tylko jeden preparat (patrz Rys. C).
- Umieścić statyw preparatów poziomo.
- Przy użyciu obu rąk jednocześnie nacisnąć klips w dół, aż wskoczy na swoje miejsce (Rys. C).
- Zdjąć rączkę statywu preparatów (1, Rys. C).
- Otworzyć szufladę załadowniczą CV5030 i umieścić statyw preparatów we wkładce łaźni HistoCore SPECTRA ST.
- Zamykać preparaty szkiełkami nakrywkowymi zgodnie z opisem zawartym w Rozdz. 5.5.




Rys. B

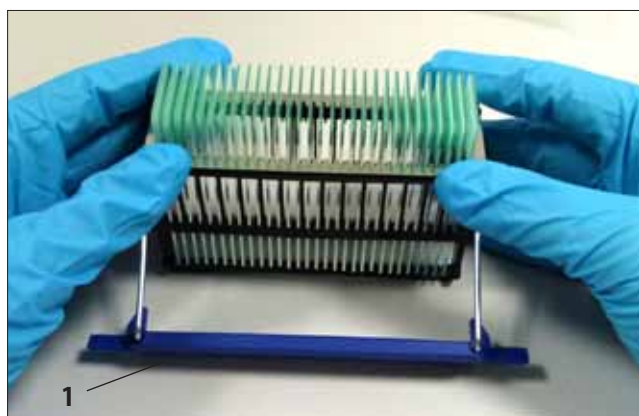

Rys. C

Nowe fragmenty rozdziału 9.1 Akcesoria opcjonalne

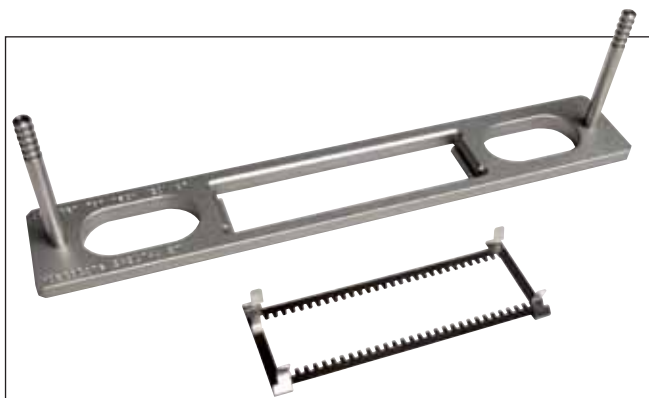

Rys. D

Zestaw z adapterem do statywu 30 HistoCore SPECTRA ST,
do statywu preparatów Leica na 30 szkiełek

Zawiera:

1 adapter 14 0478 54396

1 klips 14 0478 55510

Nr kat. 14 0478 55522

Zestaw klipsów do statywu 30 HistoCore SPECTRA ST,

Zawiera 2 klipsy

Nr kat. 14 0478 55510

Adapter do statywu 30 HistoCore SPECTRA ST,

do statywu preparatów Leica na 30 szkiełek

Nr kat. 14 0478 54396

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Straße 17-19
D- 69226 Nussloch
Telefon: +49 6224 - 143 0
Faks: +49 6224 - 143 268
Strona internetowa: www.LeicaBiosystems.com