

CM1950

凍結ミクロトーム

CM1950 取扱説明書補足シート 1v8 改訂 I
日本語版

改訂 C

本書は必ず装置と一緒に保管してください。
装置のご使用前によくお読みください。

CE



1. CM1950 取扱説明書補足シート 1v8 改訂 I

「12.3 紫外線ランプの交換」の追加説明



注意事項

CM1950 では、装置内の接続ピースと紫外線ランプに 2 つのタイプがあります。紫外線ランプを新しいものと交換する前に、装置にどのタイプが取り付けられているか確認する必要があります。

紫外線ランプの交換手順は、2 つのタイプとも同様です。

タイプの特定と紫外線ランプの適合

- ① タイプ 1: 2 ピン挿入口付き接続ピース (→ 図 1-1)、2 ピン付き紫外線ランプ (→ 図 1-2)

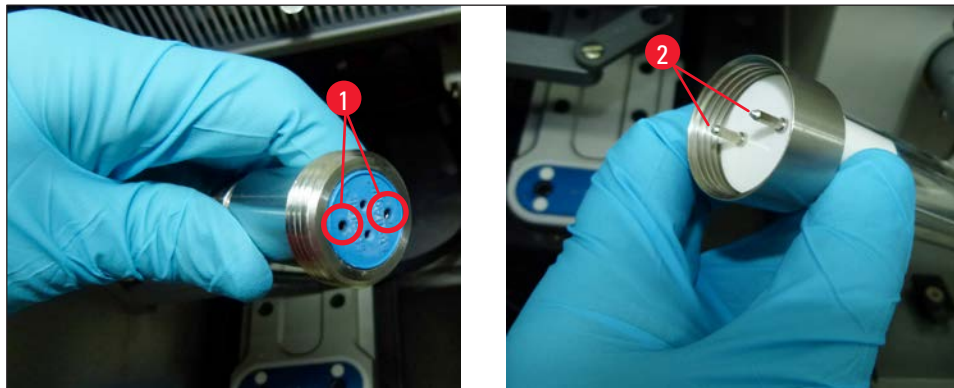


図 1

- ① タイプ 2: 4 ピン挿入口付き接続ピース (→ 図 2-1)、4 ピン付き紫外線ランプ (→ 図 2-2)

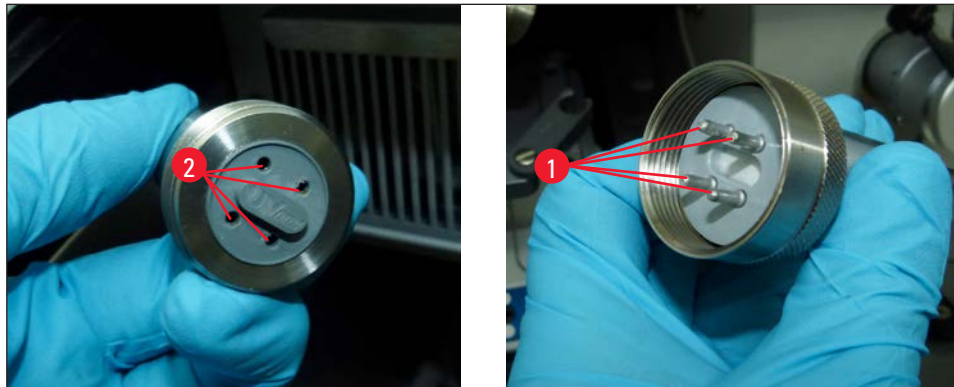


図 2

「12.3 紫外線ランプの交換」の追加説明

新しい図 95



図 3

紫外線ランプ - 2ピン

注文番号

14 0477 43192

新しい図 96



図 4

紫外線ランプ - 4ピン

注文番号

14 0471 57385

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Germany

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com