

# CM1950

## Kryostat

Tilleggsark til brukerhåndbok CM1950 1v8 Rev. I  
Norsk

### Revisjon C

Oppbevar alltid dette dokumentet sammen med instrumentet.  
Må leses før du tar i bruk instrumentet.

CE





## 1. Tilleggsark til brukerhåndboken CM1950 1v8 Rev. I

### Tilleggsbeskrivelse til kapittel 12.3 Bytte UVC-lampe



#### Merk

For CM1950 finnes det to ulike varianter av tilkoblingsstykket inni instrumentet og UVC-lampen. Brukeren må sjekke hvilken variant som er innebygd i instrumentet før UVC-lampen byttes ut med en ny.

Fremgangsmåten for å bytte UVC-lampen er lik for begge varianter.

#### Identifisere innebygd variant og matchende UVC-lampe

- ① Variant 1: Tilkoblingsstykke med 2-pinners inngang (→ Fig. 1-1), UVC-lampe, 2 pinner (→ Fig. 1-2)

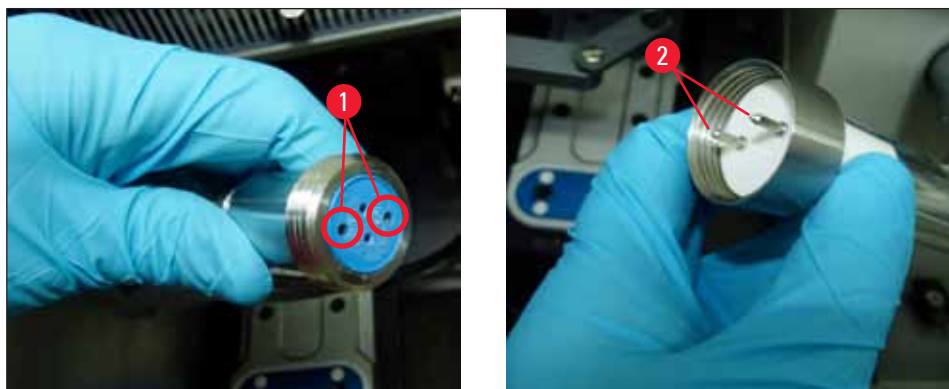


Fig. 1

- ① Variant 2: Tilkoblingsstykke med 4-pinners inngang (→ Fig. 2-1), UVC-lampe, 4 pinner (→ Fig. 2-2)

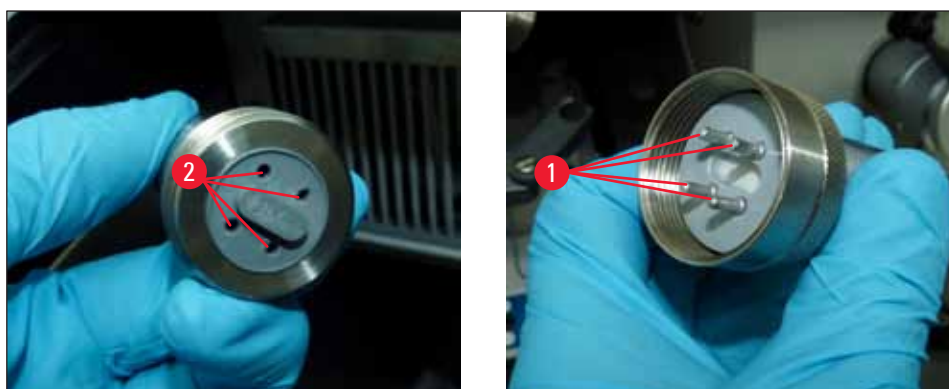


Fig. 2

## Tilleggsinformasjon til kapittel 12.3 Bytte UVC-lampe

Ny fig. 95



Fig. 3

UV-lysrør – 2 pinner

Bestillingsnr.

14 0477 43192

Ny fig. 96



Fig. 4

UV-lysrør – 4 pinner

Bestillingsnr.

14 0471 57385



[www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Str. 17-19  
D-69226 Nussloch  
Tyskland

Tlf.: +49 - (0) 6224 - 143 0  
Faks: +49 - (0) 6224 - 143 268  
Nettside: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)