



# Leica CV5030

Montavetrini





Il pannello di controllo, di facile utilizzo, consente la personalizzazione delle impostazioni in modo da soddisfare i requisiti specifici del vostro laboratorio: è sufficiente selezionare l'impostazione ideale per campioni diversi.

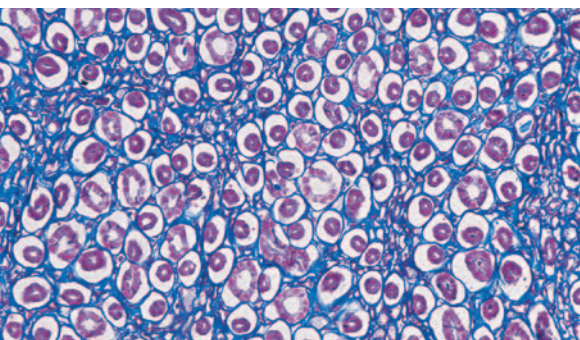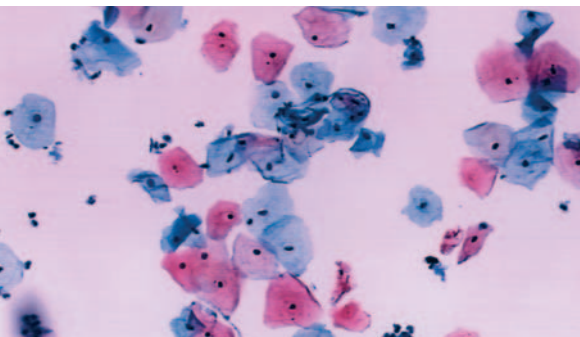

# Leica CV5030, il montavetrini ... con la possibilità di adattarsi


Un montavetrini che può soddisfare le esigenze del vostro laboratorio !

Il montavetrini Leica CV5030 si adatta facilmente ai requisiti specifici di campioni variabili quali sezioni di istologia, strisci di citologia e monostrati. Accettando praticamente i portavetrini di tutti i coloratori di vetrini da routine, il CV5030 si adatta facilmente ai requisiti attuali e futuri del vostro laboratorio.


Il Leica CV5030 permette di montare vetrini di qualità ottica superiore e che si conservano in maniera affidabile nel tempo. L'accettazione dei marchi più diffusi di mezzi di montaggio e delle diverse dimensioni di vetrini coprioggetto consente al CV5030 di adattarsi al vostro attuale laboratorio. Il funzionamento semplice e l'avanzata tecnologia del CV5030 garantiscono anni di utilizzo affidabile.

La presenza del montavetrini Leica CV5030 nel vostro laboratorio vi prepara, già oggi, al laboratorio di domani. Grazie alla sua capacità di integrazione col Multistainer Leica ST5020, il Leica CV5030 elimina il processo, tradizionalmente manuale, del trasferimento di vetrini colorati dal coloratore al montavetrini, creando a tutti gli effetti una stazione di lavoro completa.

**FINALMENTE** il montavetrini adatto alle esigenze del vostro laboratorio !

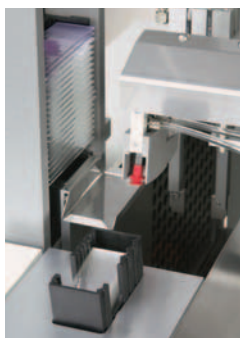

La stazione dei vetrini coprioggetto accetta diverse dimensioni di vetrini, scartando automaticamente quelli rotti. I campioni sono coperti con sicurezza e in permanenza, garantendo un'applicazione dei vetrini coprioggetto in maniera costante e con elevata qualità.

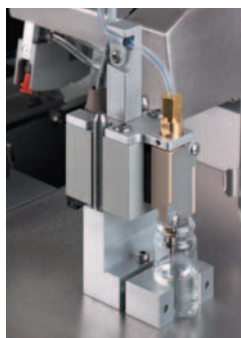

La stazione di parcheggio dell'erogatore del montante alloggia l'ugello nel solvente mantenendo così con sicurezza l'integrità di erogazione del mezzo di montaggio.



Il cassetto di carico accetta fino a 60 vetrini portaoggetto e può essere riempito con il solvente oppure a secco.



Il montavetrini Leica CV5030 in combinazione con il Multistainer Leica ST5020 crea la 1a stazione di lavoro integrata e robotizzata per colorazione e montaggio.

### SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di strumento:	Montavetrini automatizzato per vetrini coprioggetto
Tipi di campioni:	Sezioni di istologia, strisci di citologia, preparazioni monostrato
Resa:	circa 400 vetrini/ora
Dimensioni dei vetri di copertura:	22, 24 x 40, 50, 55, 60 mm, #1, #1.5
Capacità del contenitore di vetrini coprioggetto:	120-160 vetrini di copertura (a seconda della dimensione)
Mezzo di montaggio:	Accettati i tipi disponibili in commercio
Volume del mezzo di montaggio:	Impostazione singola basata sul volume, sul tipo e sulla dimensione dei coprioggetto
Volume del contenitore del mezzo di montaggio:	250 ml
Rack di ingressot:	Accettati i tipi più diffusi in commercio (fino a 60 vetrini)

Rack di uscita:	Capacità di 20 o 30 vetrini (fino a 60 vetrini)
Trattamento dei fumi:	Filtro a carboni attivi e sistema a tubo flessibile per l'estrazione dei fumi
Tensione di alimentazione:	100–250 VC A / 50–60 Hz
Dimensioni (L x P x A) (mm):	420 x 600 x 550
Peso a secco:	ca. 57 kg

Tra le altre caratteristiche vanno segnalate il montaggio a scelta, umida o asciutta, dei coprioggetto, la protezione dell'ugello dell'erogatore tramite posizione di parcheggio in solvente, funzione di memoria per un numero massimo di quattro impostazioni personalizzate, caricatore di vetrini coprioggetto Multisize™, sensore per identificare e scartare i coprioggetto rotti, modulo di trasferimento opzionale per l'integrazione col Multistainer ST5020.

Progettato e prodotto in base alle normative CE e CSA.

### LEICA BIOSYSTEMS

Leica Biosystems è un leader globale per soluzioni di workflow che mette a disposizione dei laboratori di patologia anatomica e dei ricercatori una gamma di prodotti completa e di massima qualità. Con completi sistemi di istologia caratterizzati da un'automazione innovativa, con reagenti Novocastra™ e materiali di consumo Surgipath®, Leica Biosystems offre prodotti ideali per ogni processo istologico e per ogni soluzione nei workflow di alta produttività per l'intero laboratorio.

Leica Biosystems – una compagnia internazionale con una forte rete di servizi di assistenza clienti in tutto il mondo:

#### Vendite e assistenza clienti America del Nord

America del Nord	800 248 0123
------------------	--------------

#### Vendite e assistenza clienti Asia/Pacifico

Australia	1800 625 286
Cina	+85 2 2564 6699
Giappone	+81 3 5421 2804
Corea del Sud	+82 2 514 65 43
Nuova Zelanda	0800 400 589
Singapore	+65 6779 7823

#### Vendite e assistenza clienti Europa

Per informazioni dettagliate per contattare i nostri uffici vendita o distributori Europei, visitare il nostro sito Web.



**Leica Biosystems riunisce prodotti, qualità e supporto. Offre una soluzione completa che contribuisce a migliorare il workflow, ad accrescere la chiarezza diagnostica e a fornire ciò che conta davvero: una cura migliore al paziente.**